


Kit de Aspiração a Vácuo Manual (Kit MVA) *Clique Aqui*



Número do Modelo. : MVA8K
Clique Aqui

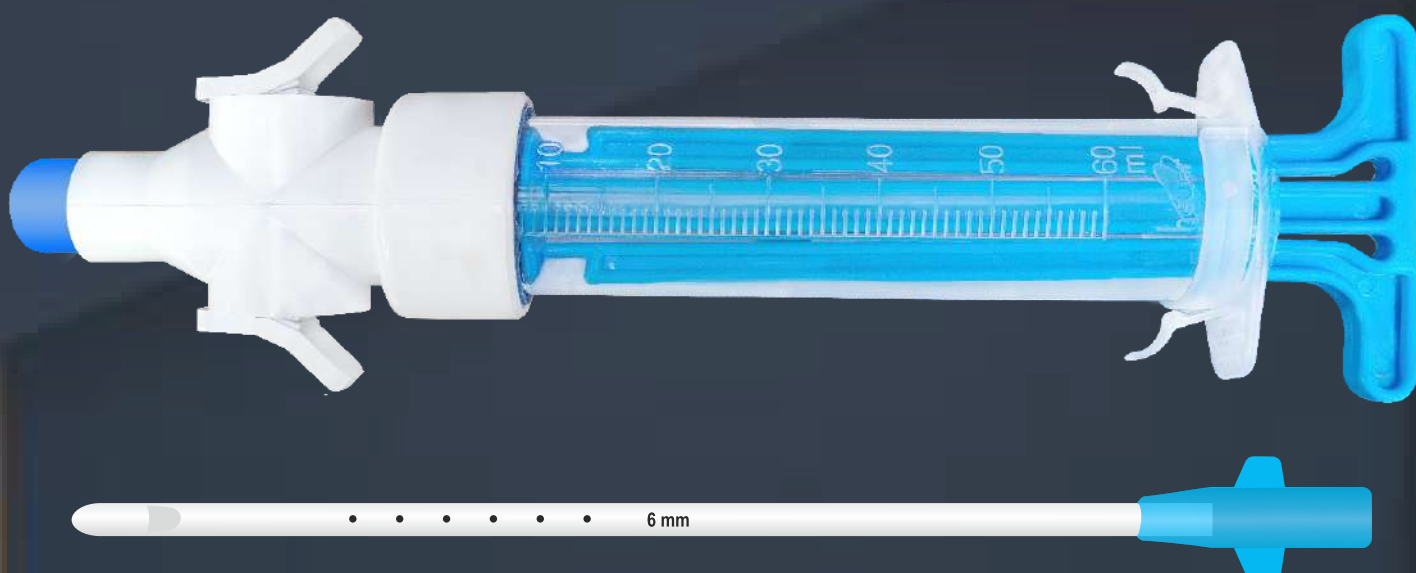

G S T Corporation Ltd. India

Clique Aqui

Para preços ou mais informações

 **+91 88000 10925**

Clique aqui para ligar

 **+91 88000 10925**



Elevating Health and Wellness

Uso Pretendido

- Aspiradores Manuais de Vácuo com Cânula de Karman de Dupla Válvula são utilizados para curetagem por sucção.
- Para aplicar sucção na cavidade uterina.
- Usado para biópsia endometrial.
- Usado para tratamento de sangramento uterino anormal.
- Usado para tratamento de aborto incompleto.
- Usado para tratamento de aborto espontâneo.
- Usado para tratamento de aborto médico mal sucedido.
- Usado para tratamento de aborto retido.
- Usado para a interrupção de uma gravidez molar.
- Usado para o tratamento de endometrite crônica.

Componentes do Produto

- O Aspirador Manual de Vácuo com Cânula de Karman da marca Heuer é composto por:
- Junta Extra.
- Parada de Colarinho Extra.
- Óleo de silicone de 5 ml/cc.
- Barril de 60 ml/cc.
- Injetor.
- Válvulas.

Características do Produto para MVA

- Inclui junta extra, parada de colarinho extra e óleo de silicone de 5 ml/cc.
- Vácuo estável: o vácuo de cada produto é testado individualmente.
- Portátil.
- Barril de 60 ml/cc capaz de produzir um vácuo de 600 - 650 mm/Hg.
- Seguro e eficaz.
- Baixo custo.
- Adequado para muitos ambientes clínicos diferentes.
- Alta satisfação do paciente e do provedor.
- Procedimento ambulatorial.
- Produtos de Concepção (POC) facilmente visíveis.
- Dispositivo de uso único.
- Nosso Pacote de Procedimento de Aspirador Manual de Vácuo com Cânula de Karman de Dupla Válvula inclui cânulas de Karman estéreis nos tamanhos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12.
- Nível de pressão estável, cada produto é controlado individualmente.

Características do Produto para Cânulas de Karman

- Comprimento total é de 22 cm.
- Superfície lisa da cânula.
- Ponta hemisférica.
- Embalado individualmente em pacote com bolsa descartável.
- Opções de diâmetro de 4-12 mm. (Excluindo diâmetro de 11mm).
- Códigos de cores correspondentes para fácil emparelhamento (quando necessário)

Código de Cor

4mm	5mm	6mm	7mm	8mm	9mm	10mm	12mm
-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------

Código de Produto / Tabela de Diâmetro

Tamanho	4 mm	5 mm	6 mm	7 mm	8 mm	9 mm	10 mm	12 mm
Código	KC4	KC5	KC6	KC7	KC8	KC9	KC10	KC12



Clique aqui para ver
**Aspiração
Técnica**



Escanear para salvar
Cartão de contato

Clique Aqui

Para preços ou mais informações

+91 88000 10925

Clique aqui para ligar

+91 88000 10925



Elevating Health and Wellness

Esterilização

- A Cânula de Karman é esterilizada com óxido de etileno.
- Validado para o padrão ISO 11135.

Vida Útil

- 5 anos.

Biocompatibilidade

- Seleção de testes para o Injector de Cânula de Karman e as próprias Cânulas de Karman.
- Citotoxicidade de eluatos de acordo com o DIN EN ISO 10993-5,
- Testes de resíduos de esterilização por óxido de etileno de acordo com o EN ISO 10993-7.
- Testes de irritação e sensibilização de acordo com o DIN EN ISO 10993-10.
- Livre de Látex e Ftalatos.

Pacote de Procedimento de Dupla Válvula do Kit de Aspiração Manual Heuer


- Uma peça do Injector de Cânula de Karman de dupla válvula.
- Total de 8 unidades de Cânulas de Karman com diâmetros de 4 a 12 mm (excluindo diâmetro de 11 mm).
- 5 ml/cc de óleo de silicone em uma garrafa plástica.
- Um colar stop sobressalente.
- Uma junta sobressalente.

Detalhes da embalagem do Kit de Aspiração Manual Heuer

- 24 unidades do Kit de Aspiração Manual a Vácuo em uma caixa mestre.
- Dimensão da caixa: 30 x 12,8 x 9,5 cm.
- Dimensão da caixa mestre: 81 x 44 x 34 cm.



Clique aqui para ver
**Aspiração
Técnica**

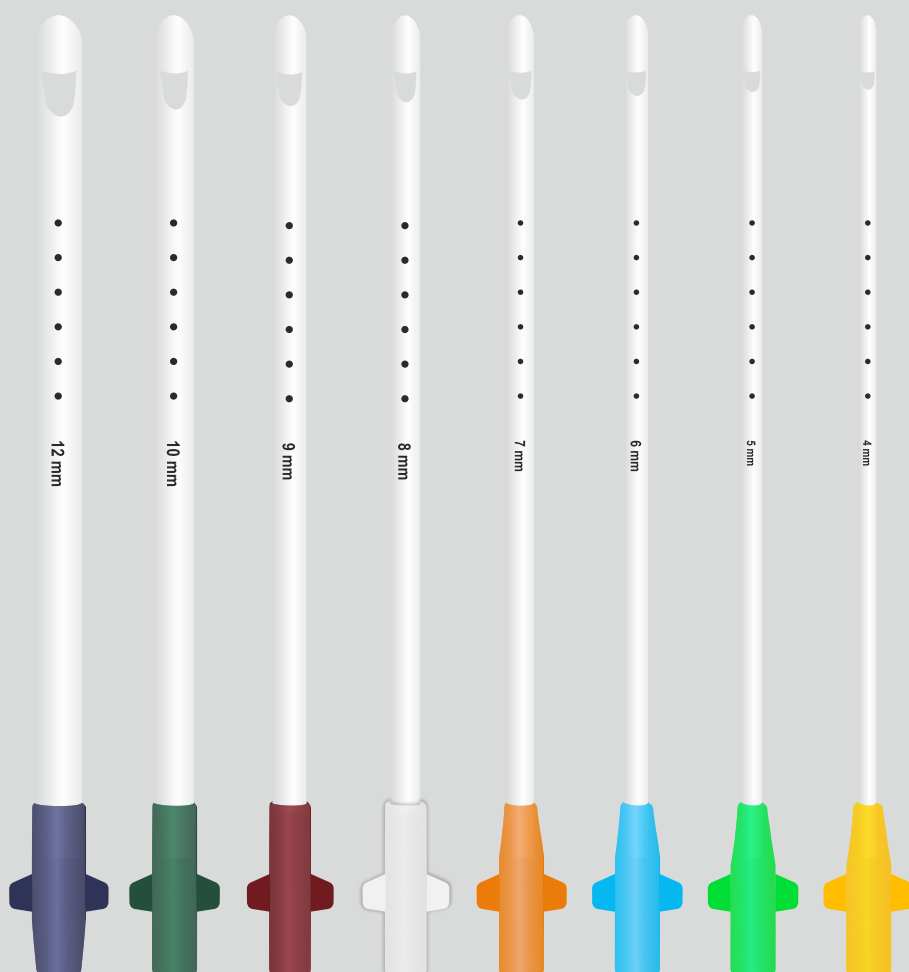

Número do Modelo. : MVA8K

Clique Aqui

Para preços ou mais informações



+91 88000 10925

Clique aqui para ligar



+91 88000 10925

Manual de instruções para uso do Kit de Aspiração a Vácuo Manual (MVA Kit) da Heuer



Clique aqui para ver
**Aspiração
Técnica**



Imagem 1

Preparando a seringa aspiradora:

1. Empurre o êmbolo completamente para dentro do cilindro.
2. Certifique-se de que o stopper do êmbolo na parte inferior do cilindro esteja travado.
3. Pressione os botões da válvula de vácuo para baixo e para frente até que você sinta que eles estão travados.

(Consulte a Imagem 1 e 2)

4. Crie a pressão negativa (vácuo) puxando o êmbolo para trás até que os braços cônicos do êmbolo estejam travados na base cilíndrica do cilindro.

(Consulte a Imagem 3)

5. Mantenha a cânula de Karman de tamanho apropriado à mão de acordo com a duração da gravidez.

6. Insira a cânula de Karman na parte superior (válvula) e realize o procedimento.

(Consulte a Imagem 5)



Imagem 2

Limpe e desmonte os instrumentos:

1. Limpe toda a superfície do instrumento completamente em água quente e de preferência detergente, não sabão.
2. Remova o cilindro (tubo) da válvula superior e, em seguida, remova o silicone interno de dentro da válvula superior.
3. Remova primeiro o stopper do êmbolo inferior e, em seguida, remova o êmbolo do cilindro.
4. Remova o anel O do êmbolo, apertando seus lados e usando o sulco cortado no êmbolo.



Imagem 3

Cuidado: Não use objetos pontiagudos ou afiados para limpar as partes da válvula ou mover o anel O. Isso pode causar danos e impedir que o aspirador mantenha o vácuo.

Esterilização e armazenamento: Reesterilize a seringa aspiradora MVA apenas antes de reutilizá-la para evitar qualquer contaminação. A cânula de Karman é descartável e não deve ser reutilizada.

Armazenamento: Todas as peças do aspirador devem ser secas, o anel O lubrificado e o dispositivo reassembled e armazenado em uma área limpa e seca até o uso.

Aviso: As cânulas de Karman da Heuer são descartáveis (uso único). Elas não devem ser reutilizadas e devem ser descartadas após cada uso. Apenas o aspirador pode ser autoclavado/esterilizado e reutilizado.

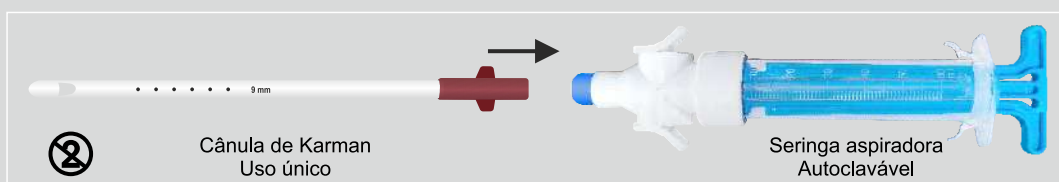


Imagem 5



Imagem 4

Clique Aqui

Para preços ou mais informações

 **+91 88000 10925**

Clique aqui para ligar

 **+91 88000 10925**

Informações gerais para o procedimento de aspiração a vácuo manual.

Aviso legal: estas são apenas diretrizes gerais de referência. O procedimento deve ser realizado apenas por profissionais médicos, de acordo com seu protocolo/guia médico padrão.

Passo 1: Preparar a paciente

- Administrar medicação para dor para ter a menor dor possível durante o procedimento.
- Dar antibióticos profiláticos para a paciente e antibióticos terapêuticos, se indicado.
- Pedir para a paciente esvaziar a bexiga.
- Realizar um exame bimanual para confirmar o tamanho e posição do útero.
- Inserir espéculo e observar sinais de infecção, sangramento ou aborto incompleto.



Escanear para salvar
Cartão de contato

Passo 2: Preparação antisséptica do colo do útero da paciente

- Usar uma esponja embebida em antisséptico para limpar o ostio do colo do útero. Comece no ostio e espirale para fora sem retratar as áreas. Continue até que o ostio esteja completamente coberto pelo antisséptico.

Passo 3: Realizar bloqueio paracervical

- O bloqueio paracervical é recomendado quando é necessária dilatação mecânica com MVA.
- Administrar bloqueio paracervical e colocar tenáculo.
- Usar a menor dose anestésica possível para evitar toxicidade.

Passo 4: Dilatação do colo do útero

- Observar a técnica sem toque ao dilatar o colo do útero e durante a aspiração. Os instrumentos que entram na cavidade uterina não devem tocar as mãos enluvadas, a pele da paciente, as paredes vaginais da paciente ou partes não estéreis da bandeja do instrumento antes de entrar no colo do útero.
- Usar dilatadores mecânicos ou cânulas progressivamente maiores para dilatar gentilmente o colo do útero até o tamanho adequado.

Passo 5: Inserção da cânula de Karman

- Enquanto aplica tração no tenáculo, inserir a cânula através do colo do útero, logo após o ostio e na cavidade uterina até tocar no fundo e, em seguida, retirá-la ligeiramente.
- Não inserir a cânula com força.

Passo 6: Aspiração

- Anexar o aspirador preparado (vácuo criado e travado) à cânula de Karman, se a cânula e o aspirador não tiverem sido previamente anexados.
- Uma vez posicionado corretamente, soltar o vácuo, pressionando os botões para a posição destravada, criando aspiração.
- Remover o aspirador da cânula de Karman e evacuar o conteúdo do útero.
- Repetir a aspiração, se necessário.

Verificar se o útero está vazio

- Espuma vermelha ou rosa sem tecido é vista passando pela cânula.
- Sente-se uma sensação granulada enquanto a cânula passa sobre a superfície do útero evacuado.
- O útero se contrai ao redor ou prende a cânula.
- A paciente reclama de cólicas ou dor, indicando que o útero está se contraindo.

Passo 7: Realizar inspeção do tecido

- Esvaziar o conteúdo do aspirador em um recipiente.
- Peneirar o material, flutuar em água ou vinagre e visualizar com uma luz por baixo.
- Inspeccionar o tecido

Passo 8: Realizar quaisquer procedimentos simultâneos

Quando o procedimento estiver completo, proceda com a contracepção ou outros procedimentos, como inserção de DIU ou reparo de laceração cervical, etc.

Passo 9: Descarte / Esterilize os Instrumentos

Processar imediatamente ou descartar todos os instrumentos, de acordo com os protocolos / diretrizes locais. Reesterilize a seringa de aspiração antes de reutilizá-la. A cânula de Karman deve ser descartada, não reutilizada.

Clique Aqui

Para preços ou mais informações



+91 88000 10925

Clique aqui para ligar



+91 88000 10925



Escanear para salvar
Cartão de contato

Clique Aqui

Para preços ou mais informações

 **+91 88000 10925**

64⁺ Years
of consistent evolution and growth

Clique aqui para ligar

 **+91 88000 10925**

Fabricado por :

Heuer International

(A division of G.S.T. Corporation Limited)
142 A/52 NSEZ, Phase-2, Noida –201 305,
Uttar Pradesh, INDIA.

Exportado por :

G.S.T. Corporation Ltd.

B-13, Okhla Industrial Area, Phase 2,
New Delhi - 110020, (INDIA)
Country of Origin : INDIA