

عدة استخلاص السوائل اليدوية بالمكنسة الكهربائية (انقر هنا MVA عدة)



MVA8K رقم النموذج :
انقر هنا



G S T Corporation Ltd. India

انقر هنا

للحصول على الأسعار أو مزيد من المعلومات.

+91 88000 10925

انقر هنا للاتصال

+91 88000 10925

الاستخدام المقصود

- تستخدم أجهزة كرمان كانيولا المعدة يدوياً للإستنشاق بالشفط وذلك بفضل صمامين لعلاج الإجهاض الطبيعي.
- لتطبيق الشفط في تجويف الرحم.
- تستخدم للحصول على نسيج من بطانة الرحم.
- تستخدم لعلاج النزيف غير الطبيعي في الرحم.
- تستخدم لعلاج الإجهاض الناقص.
- تستخدم لعلاج الإجهاض الكامل.
- تستخدم لعلاج الإجهاض الطبي.
- تستخدم لعلاج الإجهاض الضائع.
- تستخدم لإنهاء الحمل الكروي.
- تستخدم لعلاج التهاب البطانة الرحمية المزمن.



اضغط هنا للرؤية
تقنيات الطموح

مكونات المنتج

- جهاز كرمان كانيولا المعد يدوياً للإستنشاق بالشفط من العلامة التجارية هوير يتألف من :
- حشية إضافية
- قرص إيقاف إضافي.
- زيت السيليكون ٥ مل / سم مكعب.
- برميل بسعة ٦٠ مل / سم مكعب.
- حاقن.
- صمامات.

(MVA) ميزات المنتج لجهاز الاستنشاق بالشفط اليدوي للإجهاض الطبي

- يتضمن حشية إضافية، قرص إيقاف إضافي وزيت السيليكون ٥ مل / سم مكعب.
- ضغط شفط مستقر: يتم اختبار شفت كل منتج بشكل فردي.
- محمول.
- برميل بسعة ٦٠ مل / سم مكعب وقادر على إنتاج شفط بقوة ٦٠٠ - ٦٥٠ مم زئبقي.
- آمن وفعال.
- تكلفة منخفضة.
- مناسب للعديد من إعدادات العلاج المختلفة.
- ارتياح عالٍ للمرضى ومقدمي الخدمة.
- إجراء خارجي.
- يمكن رؤية منتجات الحمل بسهولة.
- جهاز للاستخدام مرة واحدة.
- يتضمن طقم إجراءات الاستنشاق بالشفط اليدوي لجهاز كرمان كانيولا الذي يتضمن كرمان الأحجام ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠ و ١٢ المعقمة.
- ضغط شفط مستقر، حيث يتم التحكم في الضغط بشكل فردي لكل منتج.

ميزات جهاز كرمان كانيولا

- الطول الكلي هو ٢٢ سم.
- سطح قطب مستقيم.
- طرف نصف كروي.
- معبأة بشكل فردي في عبوة مقطوعة.
- خيارات القطر ٤-١٢ ملم (ما عدا القطر ١١ ملم).
- رموز ألوان مطابقة للتوزيع السهل (عند الضرورة).

رمز اللون

4mm	5mm	6mm	7mm	8mm	9mm	10mm	12mm
-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------

جدول رمز المنتج / القطر

الحجم	4 mm	5 mm	6 mm	7 mm	8 mm	9 mm	10 mm	12 mm
الكود	KC4	KC5	KC6	KC7	KC8	KC9	KC10	KC12



امسح للحفظ
بطاقة الاتصال

انقر هنا

للحصول على الأسعار أو مزيد من المعلومات.

+91 88000 10925

انقر هنا للاتصال

+91 88000 10925

التعقيم

- يتم تعقيم قنية كارمان باستخدام أكسيد الإيثيلين.
- ISO 11135 صالحة ومعتمدة لمعيار.

مدة الصلاحية

- ٥ سنوات.

التوافق الحيوي


- اختيار الاختبارات لحاقن قناة كارمان وقنوات كارمان.
- DIN EN ISO 10993-5 سمية الخلاصات وفقاً لـ.
- EN ISO 10993-7 اختبارات بقاء تعقيم أكسيد الإيثيلين وفقاً لـ.
- DIN EN ISO 10993-10 اختبارات للتهيج والحساسية وفقاً لـ.
- خالية من اللاتكس والفثاللات.

مجموعة إجراءات مضاعفة قناة كارمان اليدوية للامتصاص

- قطعة واحدة من حاقن قناة كارمان ذو الصمامين.
- إجمالي ٨ قطع من قنوات كارمان بأحجام ٤ إلى ١٢ مم (باستثناء القطر ١١ مم).
- ٥ مل / سي سي من زيت السيليكون في زجاجة بلاستيكية.
- عدة إيقافات قابلة للتبديل.
- عدة جوانات قابلة للتبديل.

تفاصيل التعبئة والتغليف لمجموعة إجراءات مضاعفة قناة كارمان اليدوية للامتصاص

- ٢٤ وحدة من مجموعة إجراءات مضاعفة الشفط اليدوي في الكرتون الرئيسي.
- أبعاد الصندوق: ٩,٥ × ١٢,٨ × ٣٠ سم.
- أبعاد الكرتون الرئيسي: ٣٤ × ٤٤ × ٨١ سم.

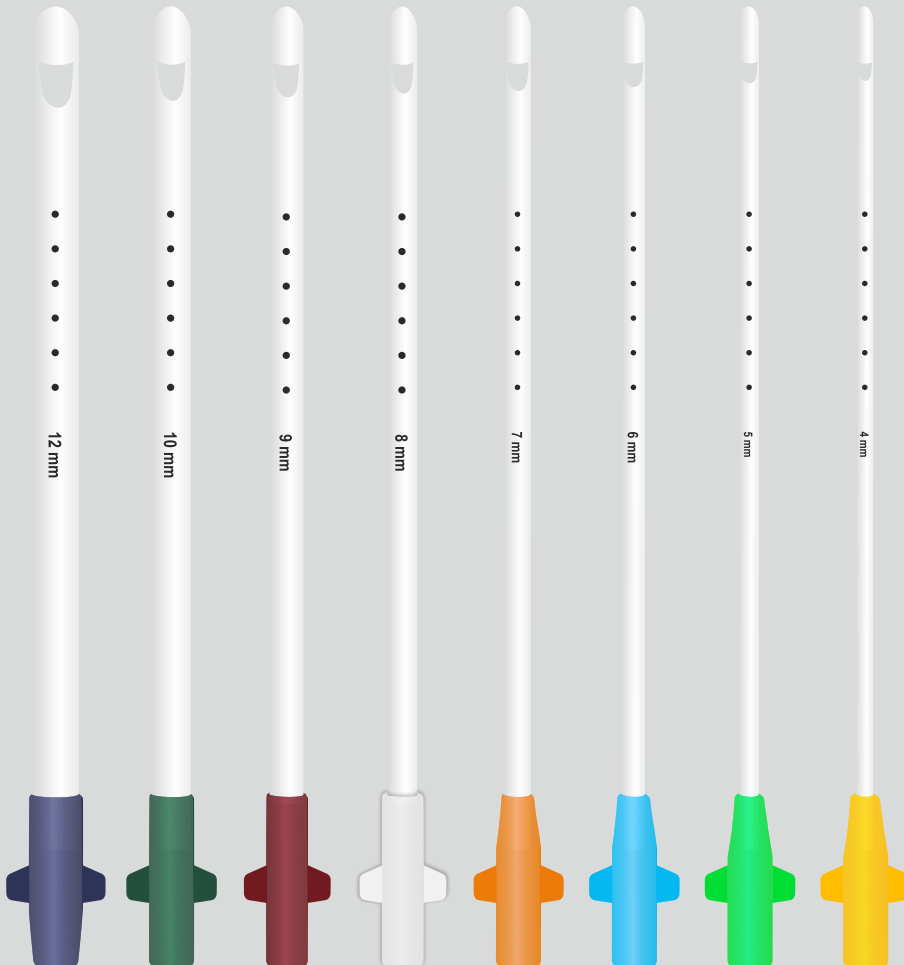

انقر هنا

للحصول على الأسعار أو مزيد من المعلومات.

+91 88000 10925



رقم النموذج : MVA8K

انقر هنا للاتصال

+91 88000 10925

للاستنشاق اليدوي بالمكنسة Heuer دليل التعليمات لاستخدام مجموعة الكهربية (MVA Kit)

إعداد حقنة الاستنشاق:


1. دفع البستون داخل الأسطوانة بالكامل.
2. تأكد من أن محبس البستون في قاعدة الأسطوانة مقفول.
3. اضغط على أزرار صمام الشفط باتجاه الأسفل والأمام حتى تشعر بأنها مقفولة. (انظر الصورة ١ و الصورة ٢)
4. قم بإنشاء الضغط السلبي (الفراغ) عن طريق سحب البستون إلى الخلف حتى يتم قفل الذراعين المدببتين للبستون على الجزء الأسطواني الأساسي. (انظر الصورة ٣)
5. حافظ على حجم مناسب من قنينة كارمان بجوارك وفقاً لفترة الحمل.
6. أدخل قنينة كارمان من الأعلى (الصمام) و قم بإجراء الإجراء. (انظر الصورة ٥)



اضغط هنا للرؤية
تقنيات الطموح



صورة 1

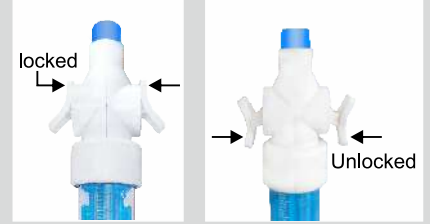

صورة 2

تنظيف وتفكيك الأدوات:

- تنظيف جميع سطح الأدوات جيداً في ماء دافئ ويفضل المنظف، وليس الصابون.
- قم بإزالة البرميل (الأسطوانة) من الصمام العلوي ثم قم بإزالة الداخلية السيليكونية من داخل الصمام العلوي.
- قم بإزالة محبس إيقاف المكبس السفلي أولاً ثم قم بإزالة المكبس من البرميل.
- للمكبس عن طريق الضغط على جوانبه واستخدام الخندق المقطوع في المكبس. O قم بإزالة حلقة
- فقد يتسبب ذلك، O تحذير: لا تستخدم أي أدوات حادة أو مدببة لتنظيف أجزاء الصمام أو لتحريك حلقة في تلف الأداة وعدم القدرة على الحفاظ على الضغط السلبي.




صورة ٣

تحذير: قنابل كارمان هوير هي قابلة للتصرف (للاستخدام لمرة واحدة). لا ينبغي إعادة استخدامها ويجب التخلص منها بعد كل استخدام. يمكن تعقيم وإعادة استخدام المحلول فقط.

قد يؤدي ذلك إلى O تحذير: لا تستخدم أي أدوات حادة أو مدببة لتنظيف أجزاء الصمام أو لتحريك حلقة التلف ومنع المحلول من الحفاظ على الضغط السلبي.

فقط قبل إعادة الاستخدام لتجنب أي تلوثات. قنابل كارمان MVA تعقيم وتخزين: إعادة تعقيم حقنة المحلول هي قابلة للتصرف ولا يجب إعادة استخدامها.

وإعادة تجميع الجهاز وتخزينه في منطقة O تخزين: يجب تجفيف جميع أجزاء المحلول وتشحيم حلقة نظيفة وجافة حتى الاستخدام.

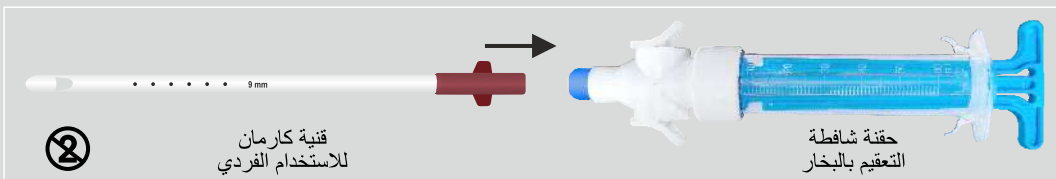

صورة 5



صورة 4

انقر هنا

للحصول على الأسعار أو مزيد من المعلومات.

+91 88000 10925

انقر هنا للاتصال

+91 88000 10925

معلومات عامة حول إجراء الاستئصال الشفطي اليدوي.

تنويه: هذه هي الإرشادات العامة للرجوع إليها فقط. يجب أن يتم الإجراء من قبل الأطباء فقط، وفقاً للبروتوكولاتهم وإرشاداتهم الطبية القياسية.

الخطوة ١: إعداد المريضة

- إعطاء أدوية تخفيف الألم للحد من الألم خلال الإجراء.
- إعطاء مضادات حيوية وقائية للمريضة، ومضادات حيوية علاجية إذا كانت مشار إليها.
- طلب من المريضة تفريغ المثانة.
- إجراء فحص ثنائي اليد لتأكيد حجم وموقع الرحم.
- إدخال مشروط ومراقبة العلامات المرتبطة بالعدوى والنزف أو الإجهاد غير الكامل.

الخطوة ٢: تطهير عنق الرحم بمطهرات للمريضة

- استخدم إسفنج مشبعة بالمطهر لتنظيف فتحة عنق الرحم. ابدأ من الفتحة وتحرك باتجاه الخارج بدون العودة إلى المناطق التي تم تنظيفها. استمر حتى يتم تغطية فتحة عنق الرحم بالكامل بالمطهر.

الخطوة ٣: إجراء كتلة العنق الرحمي

- **MVA.** يُوصى بإجراء كتلة العنق الرحمي عند الحاجة إلى توسيع ميكانيكي باستخدام.
- أدبرة كتلة العنق الرحمي وضع مشبك على العنق الرحمي.
- استخدم أدنى جرعة ممكنة من المخدر لتجنب التسمم.

الخطوة ٤: توسيع عنق الرحم

- تجنب تقنية اللمس المباشر عند توسيع العنق الرحمي وأثناء الامتصاص. لا يجب أن تلامس الأدوات التي تدخل الرحم اليد المغطاة بالقفاز وجلد المريضة وجدران المهبل للمريضة والأجزاء غير النظيفة في صينية الأدوات قبل دخول العنق الرحمي.
- استخدم الموسعات الميكانيكية أو الكانولات ذات الحجم الأكبر تدريجياً لتوسيع العنق الرحمي بلطف إلى الحجم المناسب.

الخطوة ٥: إدخال كانولا كارمان

- أثناء تطبيق الجذع على المشبك، أدخل الكانولا من خلال العنق الرحمي بعد الفتحة بمقدار قليل وضعها في التجويف الرحمي حتى تلامس الجزء العلوي من الرحم، ثم اسحبها قليلاً.
- لا تدخل الكانولا بقوة.

الخطوة ٦: الامتصاص

- ثبت جهاز الامتصاص المعد له سلفاً (تم إنشاء فراغ وتأمينه) على كانولا كارمان إذا لم يتم تثبيت الكانولا والجهاز سلفاً.
- عندما يتم وضعها بشكل صحيح، قم بإطلاق الفراغ عن طريق الضغط على الأزرار لفتح الجهاز وخلق الامتصاص.
- أزل جهاز الامتصاص من كانولا كارمان واسحب محتويات الرحم.
- كرر الامتصاص إذا لزم الأمر.

تحقق من أن الرحم فارغ

- يتم رؤية الرغوة الحمراء أو الوردية بدون أنسجة وهي تمر عبر الكانولا.
- تشعر بالإحساس الخشن عندما تمر الكانولا فوق سطح الرحم المُفرغ.
- يتعاقد الرحم حول الكانولا أو يتمسك بها.
- تشتكي المريضة من التشنجات أو الألم، مما يشير إلى أن الرحم يتعاقد.

الخطوة ٧: القيام بتفحص الأنسجة

- اسحب محتويات الجهاز المُمتص إلى حاوية.
- صقي المواد، واطفئها في الماء أو الخل واستخدم ضوءاً من تحتها.
- فحص الأنسجة للحمل والإخراج الكامل والحمل المولاري.
- إذا كان الفحص غير محدد، كرر الامتصاص و / أو قيم خيارات أخرى.

الخطوة ٨: القيام بأي إجراءات متزامنة

- عند الانتهاء من الإجراء، تابع مع وسائل منع الحمل أو إجراءات أخرى، مثل إدخال جهاز لولب أو إصلاح الدموع الرحمية، إلخ.

الخطوة ٩: التخلص من الأدوات أو إعادة التعقيم

- قم بمعالجة أو التخلص الفوري من جميع الأدوات، وفقاً للبروتوكولات / الإرشادات المحلية.
- أعد تعقيم حقنة الامتصاص قبل إعادة الاستخدام.
- يتم التخلص من كانولا كارمان ولا يتم إعادة استخدامها.

انقر هنا

للحصول على الأسعار أو مزيد من المعلومات.

+91 88000 10925

انقر هنا للاتصال

+91 88000 10925



امسح للحفظ
بطاقة الاتصال



امسح للحفظ
بطاقة الاتصال

انقر هنا

للحصول على الأسعار أو مزيد من المعلومات.

+91 88000 10925

64⁺ Years
of consistent evolution and growth

انقر هنا للاتصال

+91 88000 10925

مُصَنِّعٌ بِوَاسِطَةِ

Heuer International

(A division of G.S.T. Corporation Limited)
142 A/52 NSEZ, Phase-2, Noida –201 305,
Uttar Pradesh, INDIA.

مُصَنِّدٌ بِوَاسِطَةِ

G S T Corporation Ltd.

B-13, Okhla Industrial Area, Phase 2,
New Delhi - 110020, (INDIA)
Country of Origin : INDIA